


Aufbau des Steuergerätes Therapievorbereitung

Unabhängig davon, welches Behandlungsareal Sie therapieren möchten, müssen zur Vorbereitung der Therapie die folgenden Schritte durchgeführt werden:

Stellen Sie das Therapiegerät auf eine stabile, ebene Fläche und achten Sie dabei auf die Erreichbarkeit einer Steckdose.


- (i) Stecken Sie den Gerätestecker ⑥ des Netzteils in die Buchse ④ an der Geräterückseite (i)
- (ii) Stecken Sie das Netzteil ⑤ in eine Steckdose (ii)
- (iii) Stecken Sie die Verbindungskabel ③ den Farben entsprechend in die Buchsen ② an der Geräterückseite ein.

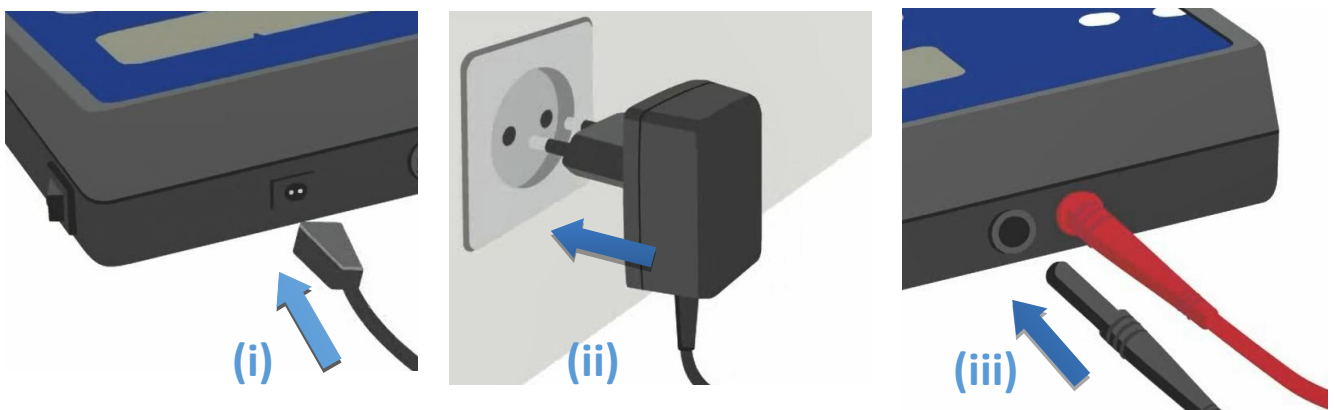

Hinweis: Geräte, mit Polaritätswechselfunktion (PWF) sind mit gleichfarbigen Buchsen und Kabeln ausgestattet, da es keine Steckvorgabe gibt. Es kann also beliebig eingesteckt werden.

Behandlungsaufbau zur Therapie der Hände oder Füße


Hände und Füße werden in einem Wasserbad behandelt. Hierzu werden die beiden Kofferschalen ① benutzt. Die Halbschalen des Transportkoffers können durch einfaches Auseinanderschieben getrennt werden, um eine bessere Handhabung zu gewährleisten. Nach der Behandlung kann der Koffer auf gleiche Weise wieder einfach zusammengesetzt werden.

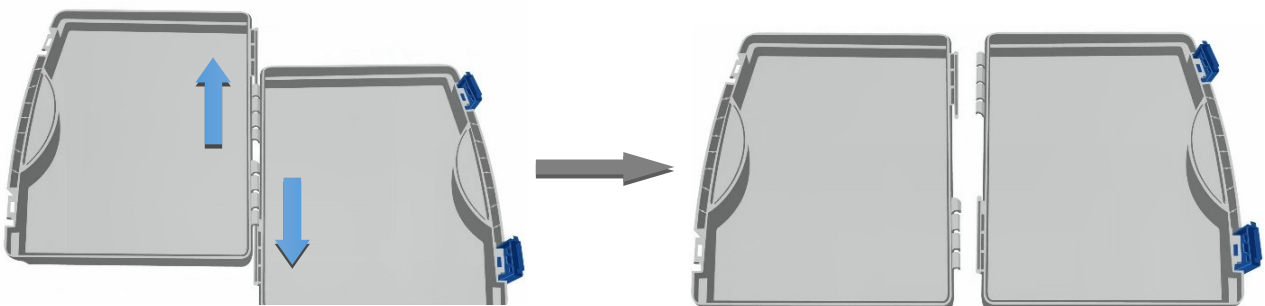


Alternativ zu den Kofferschalen wird, insbesondere zur Therapie der Hände, die Verwendung der Ergowannen **F** empfohlen. Die als Zubehör optional erhältlichen Behandlungswannen bieten eine ergonomische Handballenauflage.



Legen Sie je eine Behandlungselektrode **B** in die beiden Kofferschalen bzw. Behandlungswannen. Achten Sie beim Einsatz der ergonomischen Behandlungswannen **F** darauf, dass sich die heruntergezogene Wannenseite (Handballenauf-
lage) an der Ihnen zugewandten Seite befindet.

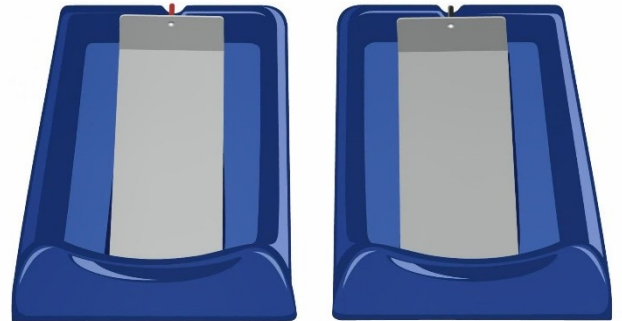


Decken Sie beide Behandlungselektroden **B** mit je einem Behandlungstuch **C** ganzflächig ab und stecken Sie die beiden Verbindungskabel **D** den Farben entsprechend auf die Anschlüsse der Behandlungselektroden **B**.

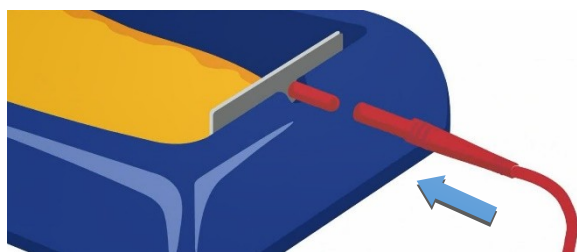

Achten Sie darauf, dass die Stecker mit Kraft ganz auf die Hälse der Elektrodenanschlüsse geschoben werden!

Befüllen Sie nun beide Kofferschalen **A** bzw. Behandlungswannen **F** so hoch mit handwarmem Leitungswasser, dass die zu behandelnden Hautflächen gut eingetaucht werden können. Der Hand- bzw. Fußrücken sollte dabei i.d.R. nicht mit Wasser bedeckt sein.

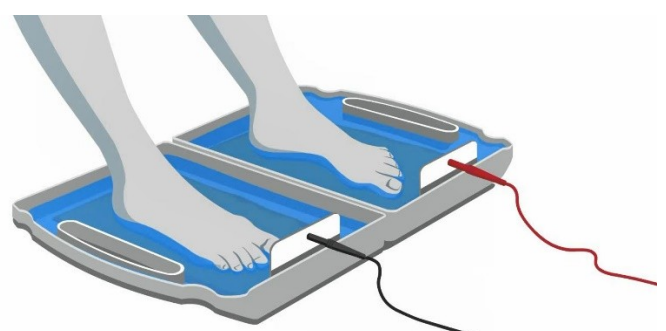

Gleichzeitige Behandlung der Hände und Füße:

Zur gleichzeitigen Behandlung von Händen und Füßen benötigen Sie, neben der Standardausstattung zur Hand-Fuß-Behandlung, zusätzlich ein Paar Ergowannen **F** und das Zubehör Set DUO (bestehend aus je einem Paar Behandlungselektroden **B**, Behandlungstüchern **C** und DUO-Anschlusskabeln).

Die Kofferschalen werden zur Therapie der Füße und die ergonomischen Behandlungswannen für die Hände verwendet. Kofferschalen und Ergowannen werden, wie zuvor bereits beschrieben, regulär mit Elektroden sowie Handtüchern bestückt und mit handwarmem Leitungswasser befüllt.

Besonderheit bei diesem Aufbau ist die Verwendung des DUO-Kabels **M**, mit dessen Hilfe zunächst jeweils zwei Elektroden verbunden werden.



Hinweis: Geräte, mit Polaritätswechselfunktion (PWF) sind mit gleichfarbigen Buchsen und Kabeln ausgestattet, da es keine Steckvorgabe gibt. Es kann also beliebig eingesteckt werden.